

#whsterilization



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en **wh.com**



Incredible inside & outside

Los esterilizadores Lara
Preparados para el futuro

lara

**El ciclo Clase B
más rápido**
de su segmento

**Guardado automático
de ciclos**
en USB de alta capacidad

**Impresora de
informes de
etiquetas y ciclos**
opcional

**Capacidad
única de
actualización**

Diseño
**ergonómico y
funcional**

Pantalla táctil
a color de
fácil navegación

**Dimensiones
perfectas**
para su uso
e integración

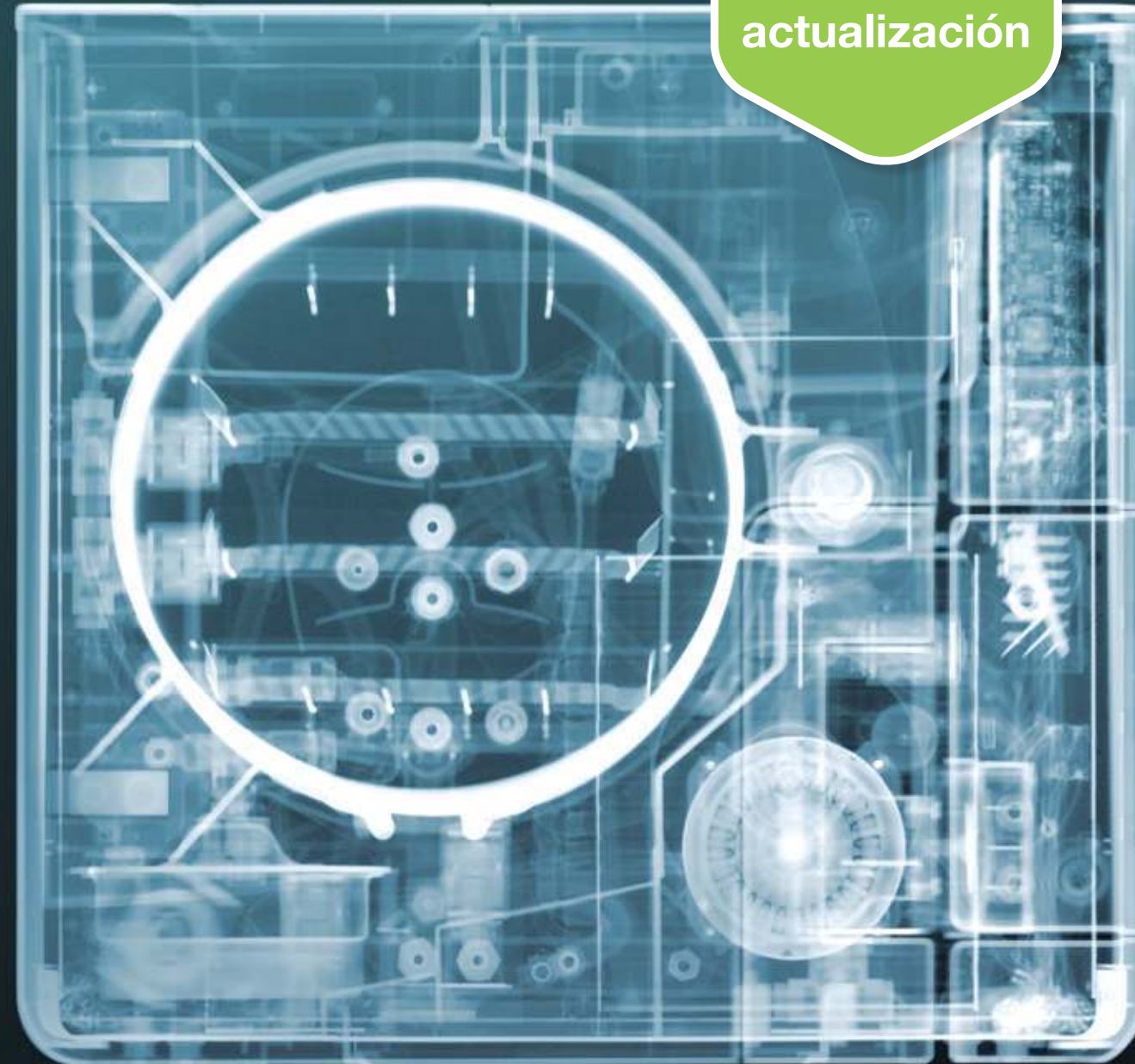


Imagen del artista Nick Veasey
realizada para W&H.
Descubra más sobre su trabajo en
nickveasey.com

Descubra su uso sencillo y su trazabilidad fiable

La pantalla táctil a color de Lara ha sido seleccionada y diseñada para hacer su trabajo diario más fácil, rápido y eficiente. Lara además ofrece un sistema de trazabilidad integral personalizado a sus necesidades.

Fácil de usar

La estructura de menús inteligente de los esterilizadores Lara garantiza un confort de funcionamiento extraordinariamente alto: gracias a la gran pantalla táctil a color, puede navegar de forma rápida e intuitiva por los programas predefinidos.

Memoria de datos de alta capacidad

Una memoria USB de alta capacidad guarda automáticamente los informes del ciclo durante toda la vida útil de Lara. Además, dispone opcionalmente de la impresora de informes de etiquetas y ciclos Lara, que le permite documentar la trazabilidad sin necesidad de software ni ordenadores adicionales.



Llenado fácil

Un embudo integrado de gran capacidad evita salpicaduras de agua durante el proceso de llenado de agua.



Acceso sin esfuerzo al tanque

Para limpiar el depósito, la tapa puede retirarse fácilmente sin necesidad de herramientas.



Llenado automático del agua

Una válvula automática de llenado de agua permite la conexión de un sistema de tratamiento de agua. El llenado y vaciado manual ya no es necesario.

lara

Descubra su capacidad única de actualización

Pase lo que pase en el futuro, con los esterilizadores Lara usted estará preparado. Su innovador sistema de actualización le permite de forma rápida, económica e individual, activar funciones adicionales que se adapten a sus necesidades o a las de futuros requisitos normativos.

Resumen de las cuatro características adicionales:



Performance

Tiempos de ciclo aún más rápidos gracias a la actualización a Eco Dry +, que ajusta automáticamente el tiempo de secado al peso de la carga. Esto ahorra tiempo y energía.



Fast Cycle

Este ciclo rápido permite la esterilización de instrumentos semicríticos no embolsados en tan sólo 20 minutos.




Traceability

Permite personalizar el esterilizador y, por lo tanto, la trazabilidad a la persona que inició el ciclo de esterilización. Se identifican con un PIN de 6 dígitos directamente en el dispositivo.



All in One

Con el código de activación «Todo en uno» usted obtiene todas las ventajas adicionales a la vez, disponiendo así de un esterilizador con una relación calidad-precio sin precedentes.

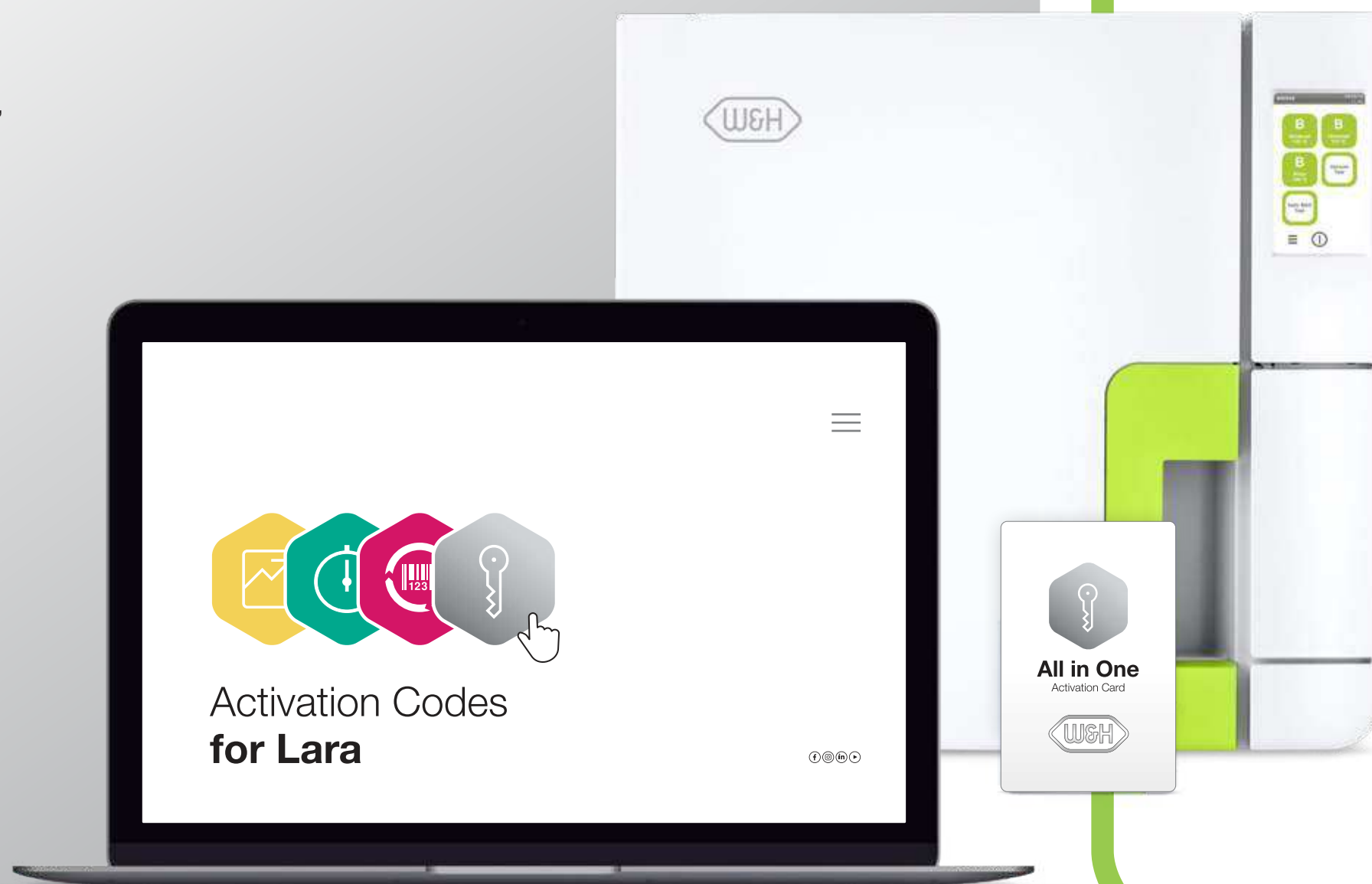

Su esterilizador personalizado en seis pasos:

Paso 1

Adquiera el código de activación en su distribuidor habitual.

Paso 2

Recibirá un código de acceso, entre en la web **activation.wh.com**

Paso 3

Introduzca el código de acceso junto con el número de serie y su modelo de esterilizador en la web de activación.

Paso 4

Se generará su código seguro de activación individual.

Paso 5

Introduzca este código en el menú de su esterilizador Lara.

Paso 6

La nueva función estará activada.



Descubra su excelente rendimiento

Los esterilizadores Lara ya ofrecen uno de los ciclos Clase B más rápidos de su clase en la versión estándar. Y puede mejorarlos aún más activando las características adicionales como Eco Dry + y Fast Cycle.

Eco Dry + adapta automáticamente el tiempo de secado a la carga, ahorrando así tiempo y energía. Disponible con código de activación, proporciona un ciclo rápido Clase S para productos semicríticos sin embolsar.



Ahorro de tiempo
Los ciclos de Clase B se utilizan para esterilizar y secar perfectamente 2 KG DE CARGA EN SOLO 30 MINUTOS.

Mayor vida útil
Gracias a la adaptación del tiempo de secado en función de la carga, se reduce la duración de la acción térmica. Esto prolonga la vida útil de sus instrumentos.

Ahorro energético
Optimizar el tiempo de secado significa un menor consumo de energía. Esto hace de Lara una «solución verde».



¡Reprocesamiento en menos de 23 minutos!

60"



Desinfección con paño en 1 minuto

Desinfecte sus instrumentos con un paño desinfectante.

10"



Mantenimiento en 10 segundos
La nueva Assistina Twin reduce el proceso de mantenimiento a un tiempo récord de 10 segundos.

20"



Esterilización en 20 minutos
Con el ciclo rápido de Lara tendrá los instrumentos listos para su uso después de tan solo 20 minutos.



Datos técnicos



Ciclo de esterilización		B-Universal 134		B-Prion 134		B-Universal 121	Fast cycle Opcional
Temperatura:		134°C		134°C		121°C	134°C
Fase de esterilización (minutos):		4'		18' 30"		20' 30"	3' 30"
Duración total del ciclo (minutos), incluido el secado completo:	Lara 17	Automático de 25' a 51'	37'	Automático de 40' a 65'	52'	de 41' a 73'	de 20' a 22'
	Lara 22	Automático de 28' a 55'	39'	Automático de 40' a 68'	54'	de 42' a 76'	de 20' a 22'
Cargas Lara 17:		sólida máx. 4,5 kg/típica 2 kg/porosa máx. 1.5 kg					máx. sin embolsar 2 kg
Cargas Lara 22:		sólida máx. 5,5 kg/típica 2 kg/porosa máx. 2 kg					máx. sin embolsar 2 kg
Contenedores Cargas Lara 17/22:		máx. 9 kg					
Ciclos de prueba:		Prueba de Helix/Bowie Dick/vacío					
Contenido suministrado: porta bandeja giratorio, 3 bandejas de aluminio, manguera de vaciado, soporte de bandeja, USB de 8 GB, herramienta de apertura de puerta, prueba de fábrica							



Nombre comercial:	Lara RIL-117	Lara RIL-122
Modelos:		
Capacidad de la cámara:	17 l	22 l
Alimentación:	200-240 V AC; 50/60 Hz; 10 A	200-240 V AC; 50/60 Hz; 10 A
Consumo de energía:	2,0-2,4 kW	
Dimensión total (al x an x pr):	465 x 452 x 646 mm	
Peso (vacío):	42,5 kg	44 kg
Tanque principal y de agua tratada:	4,8/4,8 l	
Margen de trabajo:	7 a 15 ciclos	
Espacio utilizable cámara (al x an x pr) ⁽¹⁾ :	195 x 195 x 312 mm	195 x 195 x 400 mm
Tipos de conexiones:	2 puertos USB (5 opcional), conexión integrada de llenado automático de agua	

(1) Espacio utilizable se refiere a la configuración del portabandejas estándar.

Los esterilizadores Lara se han diseñado, certificado y validado de acuerdo con las directivas y las normativas más estrictas:


2017/745 Reglamento sobre los productos sanitarios	IEC 61326-1 Compatibilidad electromagnética	IEC 61770 Aparatos eléctricos conectados a la red de agua
2012/19/EU Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	IEC 61010-1 Requisitos de seguridad	EN 13060 Esterilizadores a vapor pequeños
2014/68/EU Directiva de Equipos a presión	IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores a vapor	El esterilizador puede validarse a efectos de la norma EN ISO 17665-1

W&H AIMS

¡La seguridad es lo primero!

La higiene tiene una importancia vital en la clínica dental. W&H AIMS está aquí para ayudar con una amplia gama de productos, conocimientos fundamentales y toda la información pertinente en un solo vistazo.

Para su seguridad y la de sus pacientes.
aims.wh.com

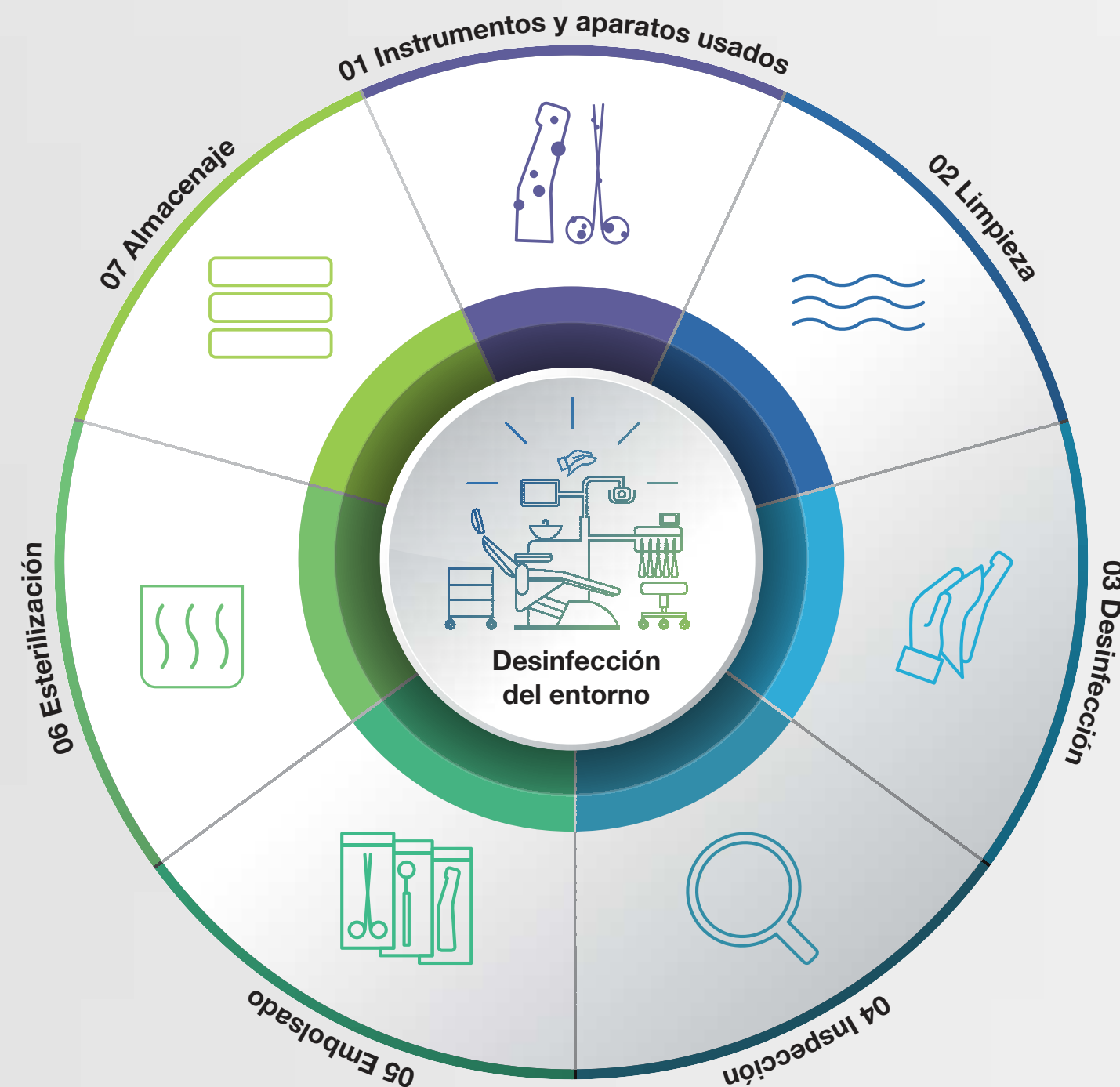

Nuestro objetivo **satisfacer sus necesidades**

W&H siempre está a la vanguardia en innovación en el área de esterilización. Por ese motivo, nuestro principal objetivo es desarrollar esterilizadores innovadores, fiables y rápidos que se adapten perfectamente al entorno y al flujo de trabajo de su consulta. Con nuestra gama de productos podemos ofrecer esterilizadores para cada necesidad.

Conozca nuestra familia de esterilizadores: ahora disponible en su distribuidor habitual o en **wh.com**



Fabricante:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Distribución:

Wehadent Ibérica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
wh.com

Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.

20494 ASP Rev. 005 / 17.07.2023
Salvo modificaciones