

#whsterilization



video.wh.com


Ahora en su
distribuidor o
en **wh.com**



Lina

el poder de la eficiencia

Sencillez por fuera
Tecnología por dentro

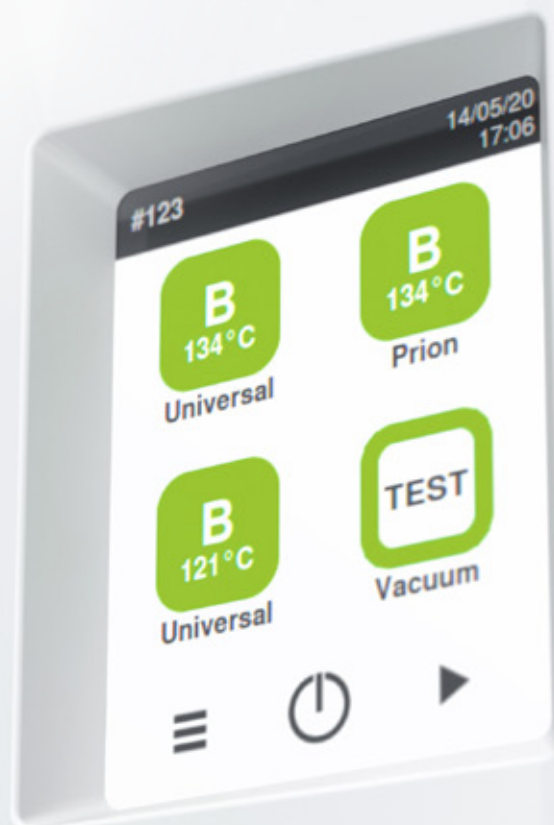

lina

Esterilizador de tipo B, pero brillante

Esterilizador de tipo B para el mejor rendimiento posible.

Para evitar la transmisión de infecciones, la esterilización por vapor juega un papel muy importante en el procesamiento de instrumentos dentales. Por lo tanto, la eficiencia y la sencillez son cruciales. Los esterilizadores Lina cumple con todos estos requisitos y muchos más: funcionamiento sencillo, diseño ergonómico y funcional, ciclos de esterilización adecuados y funciones para garantizar una alta eficiencia y los mejores resultados.



Interrumpir la cadena de infección

Esterilizador de tipo B para realizar
el procesamiento y prevenir
infecciones sin preocupaciones.



Esterilizador de tipo B
con los mejores tiempos
de ciclo de su categoría.

Fácil de usar
con la experiencia de
usuario más fluida del
mercado.

Trazabilidad avanzada
para una documentación
completa.

Componentes mejorados Procesos de trabajo simplificados

Sencillez por fuera.

El esterilizador Lina se caracteriza por un manejo fácil y un diseño ergonómico y funcional. Ideal para simplificar el proceso de esterilización y garantizar un flujo de trabajo eficiente en la clínica.

“La esterilización reduce al **mínimo** el riesgo de infección.

Lo más importante es la seguridad de los pacientes, el personal y la suya propia.

¿Cómo puede aprovechar la **sencillez mejorada**?

Fácil de usar

- ▶ La pantalla táctil de 3,5" permite un manejo fluido.
- ▶ La interfaz de usuario y la estructura de menús simplificadas ayudan en todas las actividades diarias de la clínica.

Programas de esterilización optimizados

- ▶ El programa de esterilización Eco B procesa 0,5 kg en 25 minutos.
- ▶ Lina puede procesar hasta 6 kg de carga para cumplir con todos los requisitos de las clínicas dentales.
- ▶ El ciclo B Universal a 121 °C permite incluso procesar artículos delicados y porosos, como la ropa quirúrgica.

Diseño y mantenimiento

- ▶ La tapa fácil de quitar permite acceder a los depósitos de agua sin herramientas y sin esfuerzo. Llenarlos es muy fácil gracias al embudo integrado.
- ▶ Gracias al alto nivel de fiabilidad, el intervalo de servicio es de 4000 ciclos o 5 años.
- ▶ La forma ergonómica y funcional del diseño impresiona. Además, cabe en cualquier sitio gracias a las patas modulares y la estructura compacta.

Conceptos técnicos Visiones realizadas

Tecnología por dentro.

Aparte del exterior, la alta tecnología en su interior también marca la diferencia. El esterilizador Lina se basa en un sofisticado concepto técnico que ofrece posibilidades orientadas al futuro y facilita enormemente el flujo de trabajo, hoy y mañana.

Utilice las **actualizaciones tecnológicas** para vencer todos los desafíos con su esterilizador, hoy y mañana.

¿Cómo puede aprovechar la **tecnología avanzada**?



Trazabilidad mejorada

- ▶ La documentación se guarda automáticamente en un USB de alta capacidad.
- ▶ La impresora de etiquetas contribuye a la trazabilidad, ya que ofrece la posibilidad de vincular el ciclo, la bolsa y el paciente.
- ▶ La impresora de informes de ciclo garantiza que el ciclo se documente de manera adecuada.



Conectividad avanzada


- ▶ La W&H Steri App permite controlar y supervisar el esterilizador en remoto. Además, se realiza una copia de seguridad de los ciclos en un smartphone para una mayor seguridad.

W&H AIMS ¡La seguridad es lo primero!




La higiene tiene una importancia vital en la clínica dental. W&H AIMS está aquí para ayudar con una amplia gama de productos, conocimientos fundamentales y toda la información pertinente en un solo vistazo.

Para su seguridad y la de sus pacientes.
aims.wh.com

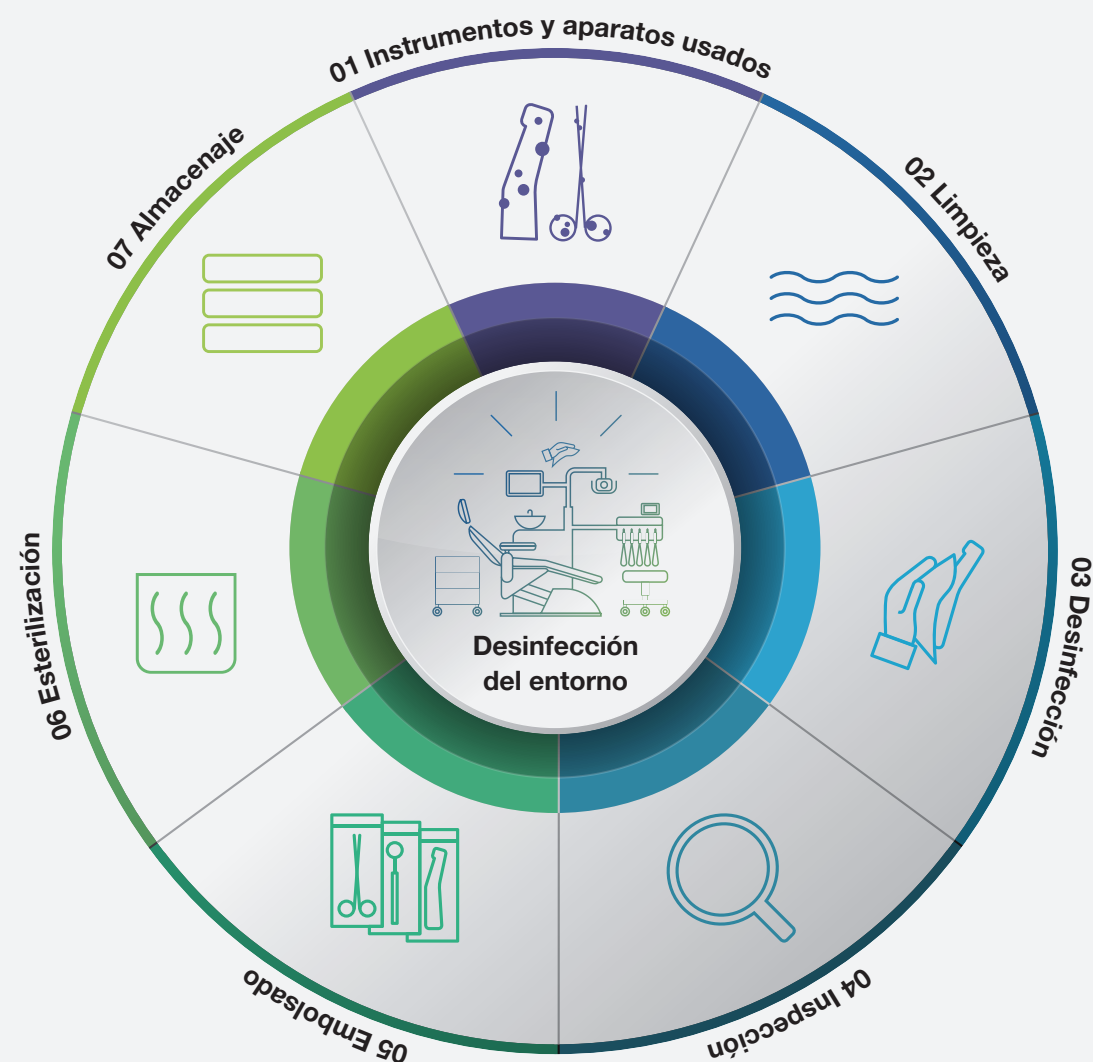

Accesorios apropiados

W&H ofrece una amplia gama de accesorios para optimizar el flujo de trabajo. Unos pequeños extras pueden conseguir unos resultados colosales. El trabajo en la consulta resulta más sencillo y permite ahorrar un tiempo considerable.

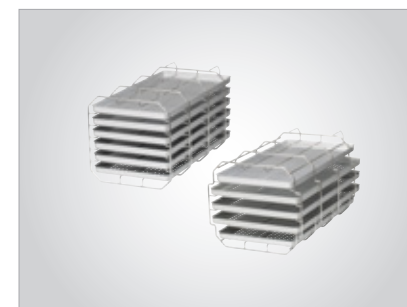

Portabandejas reversible
El mejor portabandejas para su carga:
▶ para 3 bandejas grandes y 2 bandejas estándar o 3 casetes
▶ para 6 bandejas o 3 casetes



Escáner de código de barras
Permite escanear etiquetas para ver los historiales de los pacientes.



Sprint
Imprima los protocolos de los ciclos en papel térmico con una garantía de 10 años.



Impresora de etiquetas de código de barras
La impresora de etiquetas puede conectarse al esterilizador para imprimir códigos de barras. Mejora su sistema de trazabilidad junto con el registrador de datos integrado. La impresora de etiquetas es una herramienta rápida y fácil para vincular el ciclo de esterilización con el historial del paciente.



Multidem
Multidem suministra agua desmineralizada para generar vapor y puede usarse para muchos esterilizadores convencionales y otras actividades diarias, como la limpieza de los instrumentos. Con ello se garantiza un rendimiento óptimo y homogéneo, además de la prolongación de la vida útil de su esterilizador.



Seal² y SealVal²
La selladora de W&H crea un sello ancho de 12 mm en tan solo dos segundos, sin riesgo de quemar la bolsa de esterilización. La fuerte protección, totalmente hermética, de los productos esterilizados garantiza que permanezcan estériles.

Datos técnicos

Ciclo de esterilización:		B Universal 134		B Prion 134		B Universal 121	S naked 134 (opcional)
Temperatura:		134 °C		134 °C		121 °C	134 °C
Tiempo de espera (minutos):		4'		18' 30"		20' 30"	4'
Duración total del ciclo (minutos), incluido secado completo:		Automático a partir de	Carga típica	Automático a partir de	Carga típica	Automático a partir de	Automático a partir de
	Lina 17	25'–49'	45'	40'–64'	60'	63'–71'	20'–26'
	Lina 22	28'–52'	48'	43'–67'	63'	65'–74'	21'–27'
Carga de Lina 17:		máx. 3,5–5,5(1) kg/típica 2 kg/porosa máx. 0,5–1,5(2) kg					máx. 4 kg sin envolver
Carga de Lina 22:		máx. 4–6(3) kg/típica 2 kg/porosa máx. 0,5–2(4) kg					máx. 4 kg sin envolver
Contenedores de Lina 17/22:		máx. 6 kg					
Ciclos de prueba:		de Helix/Bowie y Dick/vacío					
Artículos suministrados con portabandejas reversible, 3 bandejas de aluminio, manguera de drenaje, USB de 8 GB, herramienta para abrir la puerta, prueba de fábrica							

- (1) La duración referida en la tabla se refiere a 3,5 kg. Es posible esterilizar hasta 5,5 kg ampliando el tiempo de secado.
 (2) La duración referida en la tabla se refiere a 0,5 kg. Es posible esterilizar hasta 1,5 kg ampliando el tiempo de secado.
 (3) La duración referida en la tabla se refiere a 4,0 kg. Es posible esterilizar hasta 6,0 kg ampliando el tiempo de secado.
 (4) La duración referida en la tabla se refiere a 0,5 kg. Es posible esterilizar hasta 2,0 kg ampliando el tiempo de secado.



Nombre comercial:	Lina RIK-117		Lina RIK-122
Tipo:			
Tamaño de la cámara:	17 l		22 l
Suministro eléctrico:	200-240 V CA; 50 Hz o 60 Hz; 10 A monofásico		200-240 V CA; 50 Hz o 60 Hz; 10 A monofásico
Consumo eléctrico:	2,0-2,4 kW		
Dimensión total (an x al x p):	465 x 452 x 646 mm		
Peso (vacío):	40 kg		42 kg
Depósitos de agua principales/utilizados:	4,8/4,8 l		
Intervalo de funcionamiento:	7 a 10 ciclos		
Espacio utilizable en la cámara (an x al x p) ⁽¹⁾ :	195 x 195 x 312 mm		195 x 195 x 400 mm
Tipos de conexión:	1 puerto USB en la parte delantera (1 adicional en la trasera como opción), válvula de llenado automático de agua (opcional)		

- (1) El espacio utilizado se refiere a la configuración de porta-bandejas estándar.

Los esterilizadores Lina se han diseñado, certificado y validado de acuerdo con las directivas y las normativas más estrictas:		
2017/745 Reglamento sobre los productos sanitarios	IEC 61326-1 Compatibilidad electromagnética	IEC 61770 Aparatos eléctricos conectados a la red de agua
2012/19/EU Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	IEC 61010-1 Requisitos de seguridad	EN 13060 Esterilizadores a vapor pequeños
2014/68/EU Directiva de Equipos a presión	IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores a vapor	El esterilizador puede validarse a efectos de la norma EN ISO 17665-1

Fabricante:

W&H Sterilization Srl.
 Via Bolgara, 2
 24060 Brusaporto (BG), Italy
 t +39 035-66 63 000
 f +39 035-50 96 988
 office.sterilization@wh.com
 wh.com

Distribución:

Wehadent Ibérica S.L Unipersonal
 C/Canónigo Tárrega, 33
 46014 Valencia, España
 t +34 96 353 20 20
 oficinas.es@wh.com
 wh.com