#whsterilization

aims.wh.com

Ahora en su distribuidor o en **wh.com**

U-Son

Para una limpieza segura



u-son

Limpieza
con ondas sonoras de alta frecuencia

Para un procesamiento seguro
La limpieza ultrasónica es un método rápido y eficiente para obtener resultados perfectos. A través del ultrasonido se pueden eliminar hasta los depósitos más difíciles de alcanzar, incluso en zonas inaccesibles para la limpieza manual. El dispositivo ultrasónico U-Son de W&H permite una limpieza altamente eficaz.

La limpieza a través del ultrasonido es especialmente adecuada para piezas pequeñas, complejas y de textura fina. Esta potente limpieza no representa ningún riesgo de daño para las piezas sensibles, ni afecta su funcionamiento. Esto también prolonga la vida útil.

> La seguridad de una **limpieza de alta calidad** significa seguridad para los clientes y el personal. Se trata de romper la **cadena de infección** para evitar lesiones e infecciones cruzadas.

Resumen
de ventajas

El dispositivo ultrasónico **U-Son** es totalmente fiable y cada componente está concebido para ofrecer un rendimiento excelente en diseño y fabricación.

Gran capacidad y volumen
dos versiones diferentes
de 6 o 3 litros

Interruptor de red
de encendido y apagado
para cargar y descargar conforme
a las normas de seguridad

Esquinas redondeadas
en el interior del depósito para
eliminar impurezas y residuos
sin problemas

Ajustes de tiempo
para establecer la duración
del ciclo



Acero inoxidable
para una excelente resistencia
a la corrosión y una mayor
vida útil del dispositivo

Carcasa exterior
de acero inoxidable
para una limpieza fácil,
rápida y eficaz

Ajuste de temperatura
para diferentes grados
de contaminación

U-son

Fácil de usar
para un alto rendimiento

Exigencias diferentes requieren soluciones diferentes. Es por eso que el dispositivo **U-Son** está disponible en dos tamaños, con una capacidad de 3 o 6 litros; para un uso fácil y eficiente.

U-Son
El dispositivo U-Son está equipado con un panel de control digital que permite controlar electrónicamente el tiempo de limpieza y la temperatura.



1 **Ajuste de temperatura**
para un ajuste fácil e intuitivo de la temperatura del ciclo. Además, la función de calentamiento también se puede desactivar.

2 **Ajustes de tiempo**
para el tiempo de limpieza deseado (con opción de doble tiempo de limpieza al pulsar dos veces la tecla de minutos).


Accesorios
relacionados

Con pequeños extras se pueden conseguir grandes resultados, y con los accesorios adecuados, la limpieza es aún más fácil y eficiente.

Durante el proceso de limpieza, siempre se debe utilizar la cesta. Nunca coloque los instrumentos directamente en el fondo del depósito. !



Tapa de acero inoxidable (para 3 o 6 l)
La tapa de acero inoxidable se utiliza para cerrar el dispositivo ultrasónico y es especialmente útil para calentar el líquido limpiador: Con la tapa cerrada, se puede alcanzar la temperatura de limpieza ajustada más rápidamente. Además, la tapa evita que el líquido salga del dispositivo durante el ciclo.

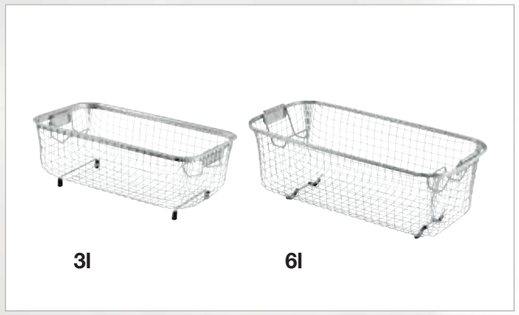

Cesta rectangular de acero inoxidable (para 3 o 6 l)
La cesta de rejilla es obligatoria durante la limpieza. Permite una limpieza óptima de los objetos y facilita el enjuague posterior de los instrumentos.



Vaso medidor y portavasos
Las vasos medidores especiales con anillo de goma ajustable ofrecen una sujeción óptima para diferentes necesidades: Limpieza de objetos pequeños, limpieza con diferentes soluciones limpiadoras o limpieza de objetos con soluciones especialmente agresivas que no deben entrar en contacto directo con el depósito de acero. El soporte sirve para fijar el recipiente durante la limpieza.



Manguera de drenaje
La manguera de drenaje en la versión de 6 litros permite un vaciado seguro, eficaz y eficiente del depósito.

Datos
técnicos

Nombre comercial: Tipo:	U-Son RIW-203	U-Son RIW-206
Capacidad del depósito	3 litros	6 litros
Capacidad de funcionamiento recomendada:	2,1 l	4,4 l
Tensión de alimentación:	230 V, 50-60 Hz	
Potencia de entrada:	120 W	180 W
Potencia de entrada con calentamiento:	100 W	200 W
Peso (kg):	2,8 kg	4,7 kg
Dimensiones totales (an × al × p):	265 × 220 × 165 mm	325 × 280 × 180 mm
Dimensiones del depósito (an × al × p):	240 × 100 × 135 mm	300 × 150 × 150 mm
Número del transductor ultrasónico:	2	3
Condiciones ambientales:	Temperaturas de 5 a 40 °C; humedad relativa 80 % a 31 °C, descendiendo linealmente al 50 % a 40 °C	
Categoría de instalación:	Clase II según IEC 61010-1	
Clasificación:	Reglamento de productos sanitarios 2017/745 Clase I, producto sanitario no activo, producto sanitario no invasivo, producto sanitario no implantable	

El dispositivo U-Son ha sido diseñado, certificado y validado según las directivas y normas más estrictas:		
2017/745 Reglamento de productos sanitarios	IEC 61326-1 Compatibilidad electromagnética	IEC 61010-1 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio

Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.

20587 ASP Rev. 000 / 12.03.2025
Salvo modificaciones

Fabricante:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Distribución:

Wehadent Ibérica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
wh.com